

いつでも、どこでも入れ歯を  
オシャレに洗浄・除菌、保管

**携帯入れ歯洗浄器**

**ウロハミック**

**取扱説明書**

**保証書付**

このたびは、携帯入れ歯洗浄器ウロハミックをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品を正しくご使用いただくためにも、この「取扱説明書」を必ずお読み下さるようお願い申し上げます。なお、お読みになった後は大切に保管しておいてください。

**UROHamic**  
5200型

**URO電子工業株式会社**

# ① 安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。


## 警告

1. ペースメーカーをお使いの方は、誤作動の恐れがありますので、ご使用にならないでください。
2. サービスマン以外の方は分解しないでください。故障の原因となります。
3. AC100V以外では使用しないでください。故障の原因となります。
4. 真珠、宝石、珊瑚、ベツ甲、象牙など表面硬度が比較的柔らかいものは洗淨しないでください。(変色したり、光沢が失われることがあります)
5. 腕時計本体(防水型を含む)は洗淨しないでください。

## 注意

1. 引火性のある溶剤(ガソリン、ベンジン等)、有機溶剤(トリクロールエチレン、アセトン等)は絶対に使用しないでください。
2. 洗淨水に消毒薬や滅菌薬などの薬品を使用しますと、本体が変質し故障の原因となります。
3. 使用中、異臭、煙がでるなどの異常がある場合には、直ちにACアダプタをコンセントから抜いて使用を中止してください。
4. 浴室や流し台シンクに直接置くなど、水にぬれる場所で使用しないでください。故障、感電の恐れがあります。
5. 本体を水に浸けたり、本体に水をかけたりしないでください。感電や故障の原因となります。

## ② 各部の名称

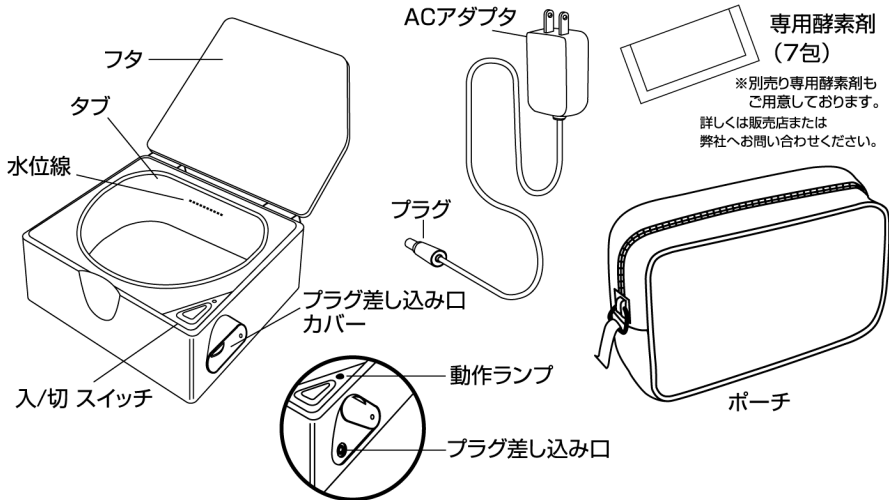

## 3

## 仕様

## 使用条件

温度範囲	+5℃～+40℃
水温範囲	+5℃～+40℃
最大注水量	洗浄物を入れない状態で、 約120cc
電源	ACアダプタ(AC100V仕様) 出力DC15V 1.2A(JET適合品)
保存温度範囲	-10℃～+60℃
防水性	防滴に準ずる

## 本体寸法・重量

寸法	95(W)×85(D)×47.5(H)mm
重量	170g

## 電気的仕様

発振周波数	90kHz/160Hz
消費電力	10W
洗浄設定時間	約6分間運転後自動停止
冷却時間	30分以上




※屋内で使用(浴室を除く)することを前提とし、凍結・結露がないことが基本条件。

※仕様および外観・デザインは品質改善のため、予告なく変更することがあります。

## ④ ご使用上の注意


- 必ず水(+5℃~+40℃)をご使用ください。水以外の使用は絶対にしないでください。
- タブに必ず水を入れてからご使用ください。水がないままお使いになりますと、故障の原因となります。
- 連続して使用した場合、過熱防止の保護回路が働き停止することがありますが、その際は電源をコンセントから抜いて、30分以上休止し、本体が冷えてから使用してください。
- 水道蛇口より直接タブに水を入れないでください。(コップなどを使用して注いでください)本体に水がかかると感電や故障の原因となる場合があります。
- 本製品は日本国内(AC100V)仕様です。海外でのご使用はできません。
- 使わないときは、必ずACアダプタをコンセントから抜いてください。

- 酸性の溶剤はステンレスのタブをいためます。使用しないでください。
- 本体を直射日光のあたるところや火気の近くにおかないでください。変形変色の原因となります。
- 本体は平坦な所でご使用ください。
- 本体を落としたり強い衝撃を加えたりしないでください。破損や変形、故障の原因となります。
- テレビ、ラジオ、パソコンの近くで使用したり、同じコンセントから使用しないでください。画像の乱れや雑音の原因となります。

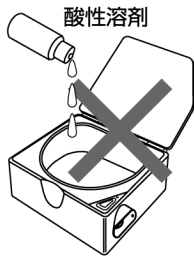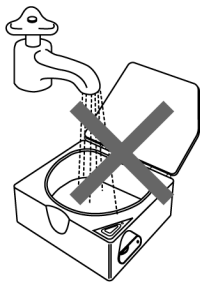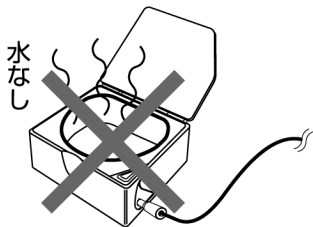

## ⑤ 洗淨できるもの

- 総入れ歯
- 部分入れ歯
- 電気カミソリの刃、ネット(外刃)
- 腕時計の金属バンド
- 金属装身具(アクセサリー)  
ネックレス、指輪、イヤリングなど  
(宝石類のついているものは、洗淨しないでください。)

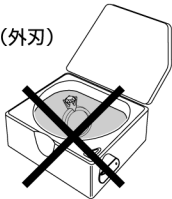

※金属の錆は落ちません。

※金属および貴金属の変色は元通りにはなりません。


※歯石、歯垢、黄ばみ、黒ずみ、たばこのヤニなどがついた入れ歯は洗淨しても落ちないことがあります。

※除去できない汚れは、歯科医にご相談ください。


※洗淨には水道水をお使いください。アルコールなどの使用は故障の原因となります。

## ⑥ 使い方 (入れ歯の場合)

- 1** 水を入れてください。  
※水位線を越えないよう  
注意してください。

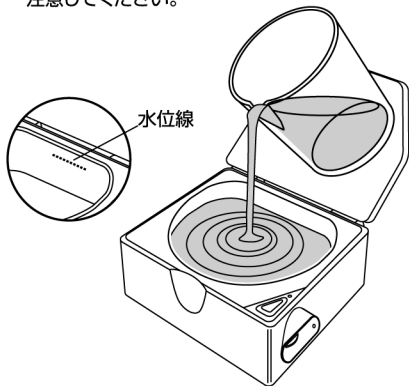


- 2** ACアダプタを本体に最後まで  
しっかり差し込みます。

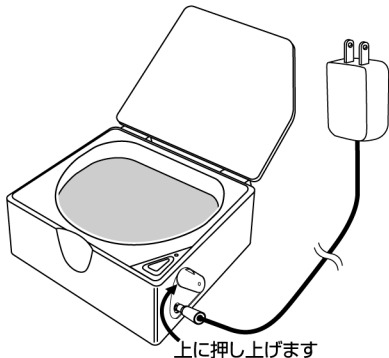




- 3** 入れ歯をタブに入れます。  
※先に入れ歯の汚れをブラッシングしますと汚れが落ちやすくなります。

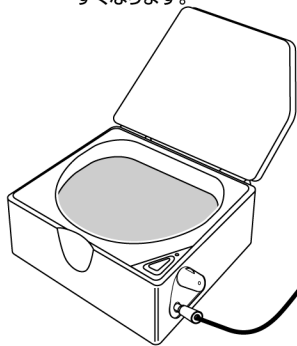


- 4** 入/切スイッチを押します。  
約6分の動作で自動的に停止します。

※途中停止はもう一度スイッチを押してください。

入/切スイッチを押す

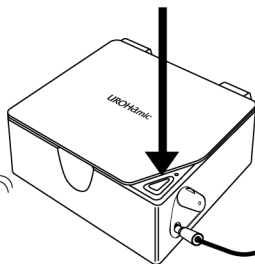

- 5** 洗浄後、軽く水洗いしてください。

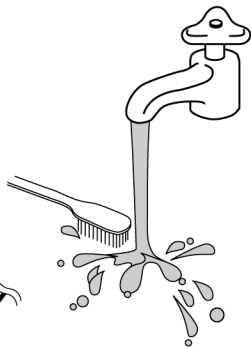

●就寝時の入れ歯ケースとしても使えます。



ワンポイントアドバイス

●汚れが気になるところを下向きにタブに入れると、より効果的です。


# 7 その他の使い方

## 電気カミソリの刃とネット（外刃）の洗浄



- 洗浄後水洗いし、十分に乾燥させてください。
- また、シェーバークリーナーなどで防錆処理をしてください。

過度の洗浄により刃こぼれすることがあります。ご注意ください。特にネット（外刃）は連続して洗浄しないでください。

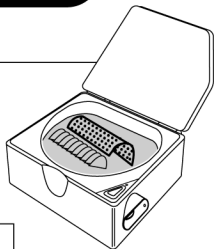


## 金属装身具の洗浄



- 洗浄後水洗いしてください。

真珠、宝石類、珊瑚、ベツ甲、象牙など表面硬度が比較的柔らかいものは洗浄しないでください。

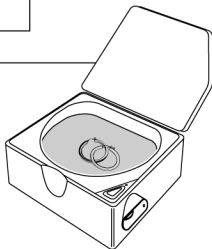


## ⑧ より効果的な洗浄のポイント


- 洗浄したい物をブラシを使って水洗いしてから、洗浄しますと効果があります。



- めるま湯(+40°Cまで)での洗浄をおすすめします。

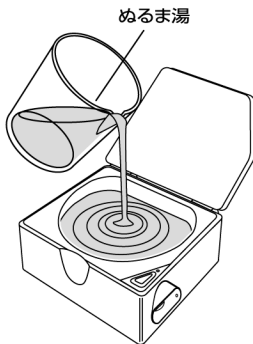

- 専用酵素剤(別売りの)の併用がポイント。
- 6時間以上の浸け置きでさらに洗浄力がアップします。

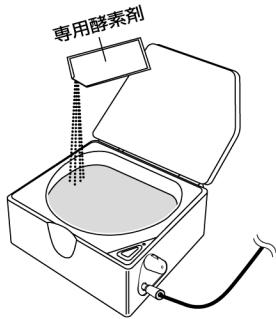

※除去できない汚れは、歯科医にご相談ください。

※市販の入れ歯洗浄剤をお使いの際は、一晚浸け置き後にご使用ください。同時に使用されますと洗浄効果が薄れます。

## 9 長くご愛用いただくためのお手入れ

### <タブの洗い方>

①プラグを抜き、残った水を捨て、本体を冷ましてからお手入れをはじめてください。

②タブの半分位までコップなどきれいな水を入れ、柔らかいスポンジなどで洗ってください。

※スポンジの表面が固いもので洗うとタブにキズがつくことがありますのでご注意ください。

③洗浄後は再度きれいな水でよくすすいでください。

※中性洗剤は使用できますが洗剤が残らないように念入りにすすいでください。

※洗っている時に本体に水をかけないように注意してください。

### <本体の洗い方>

①汚れが著しい場合、水にひたした柔らかい布をよく絞って拭いてください。

②拭いた後、かわいた布でからぶきしてください。

# 10 故障かなと思ったら

入／切スイッチを押しても動作しない	動作ランプ点灯	落下や強い衝撃を与えていませんか？	本体内部の故障が考えられます。	ACアダプタを電源コンセントから取り外し、販売店又は弊社までお問い合わせください。
	動作ランプ点滅	連続使用していませんか？	本体内部が一定温度を超えますと動作ランプが点滅し、過熱防止保護回路が働きます。安全にご使用いただくために、動作ランプ点滅中は入／切スイッチを押しても動作しません。	動作ランプが点滅中はご使用できません。30分以上休止し、動作ランプが消えてからご使用ください。
	動作ランプ消灯	プラグまたはプラグ差し込み口に水がついた可能性があります。	プラグまたはプラグ差し込み口に水がついた場合は、一時的に動作停止状態になります。	ACアダプタを電源コンセントから取外し、次にACアダプタのプラグを本体から取外します。プラグとプラグ差し込み口についた水をよくふき取ります。しばらくしてからACアダプタをもう一度取付け直してください。（電源リセット機能）
		洗浄中に停電などがありませんでしたか？	洗浄中に停電などによる電源異常で停止したあとは、入／切スイッチを押しても動作しない場合があります。	ACアダプタを電源コンセントから取外し、次にACアダプタのプラグを本体から取外します。しばらくしてからACアダプタをもう一度取付け直してください。（電源リセット機能）

※動作中、本体が暖かくなりますが異常ではありません。

※上記内容が原因ではないと思われる場合は、お買上げの販売店、又は弊社までお問い合わせください。

つぎのような場合には保証期間内でも有料修理になります。

- ①誤ったご使用、落下、お客様による改造等による故障または損傷。
- ②保管上の不備によるもの、およびご使用者の責に帰すと認められる故障または損傷。
- ③火災、地震、水害、異常電圧、指定以外の電源およびその他の天災地変や衝撃などによる故障または損傷。
- ④保証書のご提示がない場合および必要事項（お買い上げ日、販売店など）の記入、捺印がない場合。
- ⑤保証書にお買い上げ日、保証期間、販売店などの記載の不備な場合あるいは語句を書き換えられた場合。
- ⑥ご使用後の外装面のキズ、破損、外装部品、付属品の交換。  
※お買い上げ店または弊社営業所にご持参また

は送付していただく際の諸費用は、お客様のご負担となります。

- ・保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
  - ・本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証書は取扱説明書の裏面に付いています。お買い上げ日などの記入及び記載内容をご確認の上、大切に保管してください。
  - 保証期間はお買い上げ日より1年間です。万一故障（前記以外）の際は、保証書に基づき修理いたします。お買い上げの販売店又は弊社までお申しつけください。
  - 保証期間を経過した後、修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店又は弊社までご相談ください。修理により本品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料で修理いたします。
  - 本品の修理対応年数（機能を維持するために必要な部品の最低保有年数）は製造終了後5年といたします。なお、期間経過後も故障内容によっては、修理が可能な場合もありますのでお買い上げの販売店、又は弊社までお問い合わせください。

12

## 保証書

## 保証書

本書は、取扱説明書に基づく通常のお取扱いにおいて、  
 万一保証期間内に故障が生じた場合に無料修理を行うことをお約束するものです。  
 保証期間中に修理されます場合は、本書をご用意の上、お買い上げの販売店又は、弊社までご依頼ください。  
 ●※印欄に記入および販売店の捺印のないものは無効となりますのでご注意ください。  
 ●本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

品名	携帯入れ歯洗浄器ウロハミック 5200型		
製造番号			
保証期間	お買い上げ月より1ヶ年		
お買い上げ 年 月 日	※	年	月 日
お客様	※お名前		
	※ご住所		
	電話※	( )	
販売店	※住所・店名		
	電話	( )	
			印

この保証書は本書に明示した期間及び条件に基づき、無料修理をお約束するものです。  
 この保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
 修理等についてご不明な点がございましたらお買い上げの販売店又は、弊社までお問い合わせ下さい。

URO電子工業株式会社